



SICHERHEIT  
AM ARBEITSPLATZ

# Plum Green Plug & Heat Box


Staubdichte Wandbox aus stoßfestem Polystyrol für schnelle und einfache Erste Hilfe.

Ungeachtet der Ursache muss bei Verletzungen im Auge oder Wunden sofort gehandelt werden. Um entsprechend vorbereitet zu sein, ist ein schneller und leichter Zugang an Ort und Stelle wichtig – auch bei kalten Bedingungen.

Die Plum Green Plug & Heat Box enthalten ein Hezelement, das für eine angenehme Temperatur der Spülflüssigkeit sorgt.

## PRODUKTINFORMATIONEN UND VORTEILE

- Staubgeschützte Wandstationen aus Polystyrol
- Energieverbrauch: 20W
- Stromversorgung: An einen 12-V-DC-Zigarettenanzünder oder einen lokalen Konverter anschließen
- Heizfolie ist CE-geprüft in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (EN 60950-1/A2:2013)
- Die Box sollte vor Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Sonne etc.) geschützt werden.
- Die Box ist so voreingestellt, dass sie eine Augenspültemperatur von 16 °C bis 38 °C innerhalb eines Außentemperaturbereichs von -20 °C bis +15 °C gewährleistet.
- Wenn ein Transformator verwendet wird, muss dieser die geltenden örtlichen Anforderungen an Isolierung und Überstromschutz erfüllen.
- Wird ohne Flaschen geliefert

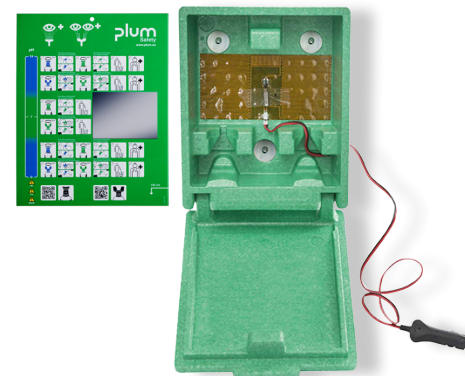

## Plum Green Plug & Heat Box

Geeignet für 2 Flaschen 200 ml oder 500 ml Wund und Augenspülung mit Augenaufsatz für 1 Auge oder DUO mit Augenaufsatz für 2 Augen.

Art.-Nr.	4672
Abmessungen	H 270 x B 225 x T 110 mm
Wird leer geliefert. Transformator nicht enthalten.	

## STROMANSCHLUSS

- Wenn ein Transformator verwendet wird, muss dieser den geltenden Vorschriften zur Isolierung und zum Überstromschutz unterliegen
- Plum Safety ApS übernimmt keine Haftung für die falsche Wahl eines Transformators und damit auftretenden Stromschlägen oder anderen Gefahren

## BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES!

- Wenn sich der eingefügte Thermostat von der Heizfolie gelöst hat, muss die komplette Box ausgetauscht werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer Überhitzung des Flascheninhaltes.
- Es wird empfohlen, die Temperatur in der Box mindestens 4 x jährlich zu kontrollieren. Die Kontrolle kann einfach durchgeführt werden, indem man mit der Hand prüft, ob die Flaschen lauwarm sind (ca. 20° C.)

## KONTAKT

info@plum-deutschland.de  
+49 4721 681801