

Plum Green Plug & Heat Box



SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Poste mural protégé contre la poussière en polystyrène résistant aux chocs pour des premiers secours rapides et faciles.

Quelle que soit la raison, il est souvent nécessaire d'obtenir une aide rapide lorsque quelque chose pénètre dans une plaie ou dans les yeux. Par conséquent, la préparation doit être en place et être facilement accessible sur le lieu de travail – même par temps froid.

Les Plum Green Plug & Heat Box contiennent un élément chauffant, qui permet au liquide de la douche oculaire d'atteindre une température confortable.

CARACTÉRISTIQUES


- Station murale anti-poussière en polystyrène résistant aux chocs
- Consommation électrique : 20W
- Alimentation électrique : Connecter à un allume-cigare 12V DC ou un convertisseur local
- La feuille chauffante est homologuée CE en conformité avec la directive basse tension 2006/95/CE (EN 60950-1/A2:2013)
- Le boîtier doit être placée à l'abri des intempéries (pluie, neige, soleil, etc.)
- Le boîtier est pré-réglé pour assurer une température de douche oculaire de 16°C à 38°C dans une plage de température externe de -20°C à +15°C
- Les flacons lave-oeil de recharge ne sont pas inclus

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- En cas d'utilisation d'un transformateur, celui-ci doit répondre aux exigences locales en matière d'isolation et de protection contre les surcharges de courant
- Plum Safety ApS ne saurait être tenu responsable d'accidents par électrocution ou autres dangers issus d'un choix de transformateur inadapté

AVERTISSEMENT !

- Si le thermostat se déconnecte de l'enveloppe chauffante, le coffret complet doit être remplacé.
En l'absence de remplacement, le contenu des flacons encourt un risque de surchauffe
- Il est recommandé de contrôler la température du coffret au moins 4 fois par an. Cette vérification peut simplement consister à toucher les flacons pour s'assurer qu'ils sont tièdes (~ 20 °C)

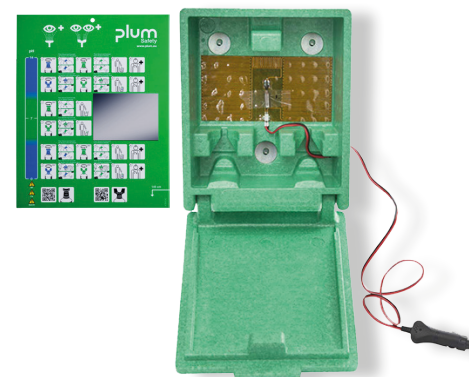

Plum Green Plug & Heat Box

Adapté pour 2 flacons de 200 ml et/ou 500 ml de l'oeil avec œillère simple ou DUO.

Réf.	4672
Dimensions	h 270 x l 225 x p 110 mm
Livré vide. Transformateur non inclus.	

info@plum.eu
+45 6916 9600

plum
Safety