



SAFETY AT WORK



SOLUTIONS DE
PREMIERS SOINS
SUR MESURE

plum
Safety

Bienvenue chez Plum Safety

Experts internationaux, nous proposons des produits de grande qualité et des connaissances spécialisées dans les solutions de premiers soins pour le lieu de travail.

Nous voulons que vous soyez en sécurité au travail !

NOTRE HISTOIRE DEPUIS 1860


Plum Safety ApS est une entreprise danoise basée à Assens, où se trouvent notre siège social, nos installations de production et notre entrepôt. Forts d'une longue tradition remontant à 1860 et de plus de 50 ans d'expérience dans le secteur de la sécurité, nous sommes aujourd'hui spécialisés dans les solutions de premiers soins qui contribuent à rendre les lieux de travail plus sûrs.

La gamme de produits Plum Safety comprend des solutions lave-œil, des pansements, du gel anti-brûlures, des bandages, des solutions de décontamination et d'autres produits de premiers soins pratiques conçus pour un traitement rapide et efficace des blessures mineures dans un large éventail d'environnements de travail.

Aujourd'hui, nos produits sont utilisés sur des lieux de travail en Europe et au-delà, respectant les protocoles de sécurité dans les usines, les ateliers, les laboratoires, la production alimentaire et les institutions publiques.

PRÉSENCE À TRAVERS LE MONDE

Nous sommes présents dans le monde entier et sommes représentés dans la majeure partie du monde. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide pour trouver votre fournisseur de sécurité !

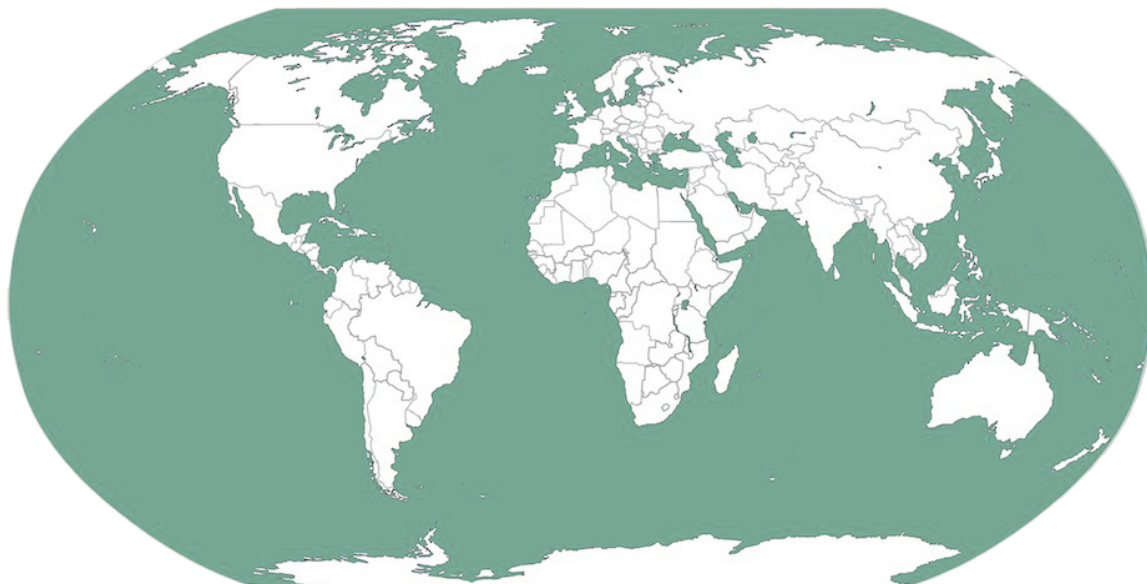

N'hésitez pas à nous contacter
info@plum.eu
+45 69 16 96 00



Sommaire

Protégez votre personnel	4
L'application Plum Safety Reminder	5
Choisir le bon lave-œil et nettoyant plaies	6
Manipuler les bouteilles	8
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride	10
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	12
Plum Wound and Eyewash Spray	14
Plum Open Station	16
Plum iBox	19
Coffrets Plum Green Box	22
Solution de décontamination – Plum BodyNeutrAll	24
Pansements et distributeurs Plum QuickFix	26
Plum QuickSoft Cohesive Bandage	32
Plum QuickSafe®	33
Plum 1Aid Station	38
Traitement des plaies et des yeux	40
Kits de base	42
Plum Safety est désormais conforme au MDR	43

Protégez votre personnel

Choisissez un équipement adapté à votre site

Un accès rapide et pratique aux premiers soins permet de limiter les séquelles en cas d'accidents et de préserver la sécurité de votre lieu de travail.

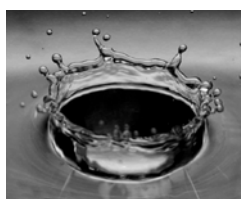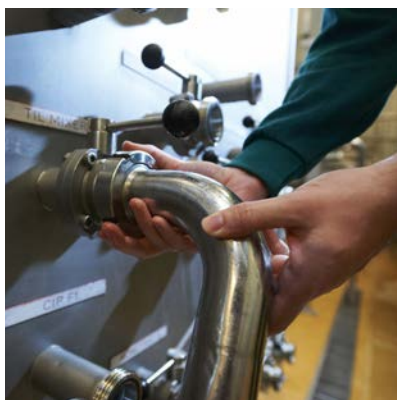

Les accidents se produisent tous les jours. Assurez l'accès à des solutions de premiers soins adaptées sur les lieux présentant un risque d'accident afin d'en minimiser l'ampleur et les conséquences. Une solution de premiers soins adaptée à votre lieu de travail vous aidera à vous préparer aux accidents et à traiter rapidement les blessures oculaires, coupures et autres plaies mineures d'une manière sûre et hygiénique.

UNE AIDE SUR MESURE, RAPIDE ET EFFICACE POUR VOTRE ACTIVITÉ

Une large gamme de solutions lave-œil, pansements, gels anti-brûlures et lingettes nettoyantes permet un traitement rapidement, de votre collègue ou de vous-même, afin de minimiser les séquelles d'un accident. Il est essentiel de disposer d'une combinaison de produits de sécurité adaptée aux besoins de votre lieu de travail.

Nous vous assistons pour déterminer la meilleure solution, qu'il s'agisse d'un espace de bureaux ou d'un environnement à risque élevé dans lequel des acides ou des bases sont manipulés, comme la recharge de batteries, le nettoyage industriel, les opérations de laboratoire ou l'industrie pétrochimique.

DES SOLUTIONS PRATIQUES POUR VOS JOURNÉES DE TRAVAIL CHARGÉES

Vos mains, vos yeux et votre tête sont vos outils de travail les plus importants. Même anodin, tout incident peut affecter votre travail et un accident plus grave peut avoir des répercussions plus grandes encore si vous n'êtes pas préparé.

Avec des précautions appropriées, vous disposerez d'une solution de premiers soins adaptée à portée de main pour minimiser considérablement les répercussions des petits accidents du quotidien.



Compte gratuit. Produits illimités. Notifications automatiques.
Rapports d'inspections.

OUTIL SIMPLE ET EFFICACE POUR LA GESTION DES DATES DE PÉREMPTION


Aidez votre client et positionnez-vous en tant que distributeur dans l'application Plum Safety Reminder, un outil gratuit pour gérer efficacement les dates de péremption.

Conçu pour faciliter la vie des employés responsables des produits de sécurité, cet outil offre une présentation complète des produits et des alertes automatiques par e-mail.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Compte gratuit
- ✓ Gestion simple des dates de péremption et rapport d'utilisation des produits
- ✓ Alertes automatiques par e-mail
- ✓ Gestion de plusieurs emplacements et/ou sites
- ✓ ... Et de plusieurs distributeurs
- ✓ Scan des produits afin de charger des informations
- ✓ Rapports d'inspections

+45 6916 9600
info@plum.eu

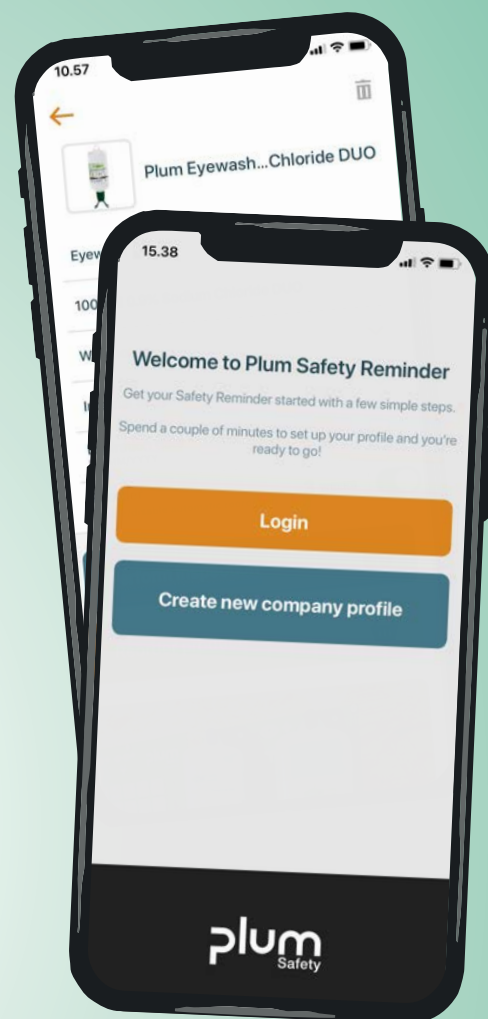

**SCANNEZ ET
TÉLÉCHARGEZ
MAINTENANT**



plum
Safety

Choisir le bon lave-œil et nettoyant plaies

Lorsqu'il s'agit d'accidents impliquant des plaies ou les yeux, la matière dangereuse varie et vous devez alors choisir la solution appropriée en conséquence.

La cause d'un accident détermine quel lave-œil et nettoyant plaies est requis. Lorsqu'un accident se produit, il est essentiel de déterminer s'il est causé par un corps étranger ou par des acides ou des bases et, si possible, de connaître la valeur de pH de la substance en question.

La bonne connaissance de vos produits chimiques vous permettra de choisir la solution de premiers soins la mieux adaptée.

Un plan d'utilisation de lavage des yeux et de nettoyage de plaie vous aide à choisir le lave-œil et nettoyant plaies approprié grâce à des directives claires. Placez le plan à proximité des stations de premiers soins, des coffrets et des Plum QuickSafe®.

Réf. 4080043

Dimensions : L : 22,8 x H : 29,0 cm

L'échelle de pH, s'étendant de 0 à 14, quantifie l'acidité et la basicité des substances.

- Un pH de 7 est neutre.
- Un pH inférieur à 7 est acide.
- Un pH supérieur à 7 est basique.

Si le pH est fortement acide ou basique, commencez par rincer avec Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Jetez le bouteille, puis rincez avec Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences.

Si le pH est neutre, rincez avec Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride jusqu'à ce que la bouteille soit vide et jetez-la après usage.

The poster features a central pH scale from 0 to 14. To the left of the scale, instructions are provided for acidic and basic substances. To the right, a grid of 12 numbered illustrations shows the steps for using different Plum products: Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (DUO), Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (DUO), and Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (DUO). The bottom of the poster includes QR codes for video instructions, a warning section for HF, Ca, and NaClO, and a dimension line indicating a height of 145 cm.

QR code :
Utiliser le lave-œil
et nettoyant plaies
avec une œillère
(vidéo animée)

QR code :
Utiliser le lave-œil et
nettoyant plaies avec une
œillère DUO (vidéo animée)

Fixez le plan d'utilisation au mur, à
côté de la station. Marquez un repère
à 145 cm du sol et placez le plan
d'utilisation selon ce repère.



Choisir le bon lave-œil et nettoyant
plaies et l'utiliser avec une œillère



Choisir le bon lave-œil et nettoyant
plaies et l'utiliser avec une œillère
DUO





Rinçage simultané des deux yeux

Vous n'avez plus besoin de choisir quel œil vous devez sauver. L'œillère Plum DUO est une solution unique permettant de rincer les deux yeux en même temps et de les sauver tous les deux.

DE NOMBREUX ACCIDENTS AFFECTENT LES DEUX YEUX

Les accidents impliquant des produits chimiques affectent souvent les deux yeux. L'œillère DUO vous prépare à ce risque en permettant le rinçage simultané des deux yeux. Épargnez-vous le souci de déterminer quel œil sauver. Sauvez les deux à la fois !

ŒILLÈRE CONÇUE POUR UN RINÇAGE OPTIMAL

Outre le degré d'acidité ou de basicité, la durée de contact est le facteur le plus important dans les accidents impliquant des acides ou des bases. Il est essentiel de disposer d'un équipement de premiers soins apte à neutraliser la matière dangereuse aussi rapidement que possible. L'œillère DUO unique permet de traiter les deux yeux en même temps.

La forme de l'œillère aide à garder les yeux ouverts pendant le rinçage et garantit le bon flux de liquide et la bonne durée de rinçage.





Remarque :
Pour l'irrigation des plaies, la forme de l'œillère n'a pas d'importance.

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride et Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate sont des produits à usage unique, garantissant que le liquide de rinçage est stérile à chaque utilisation.

plum
Safety

et pourquoi il est important de toujours les positionner tête en bas

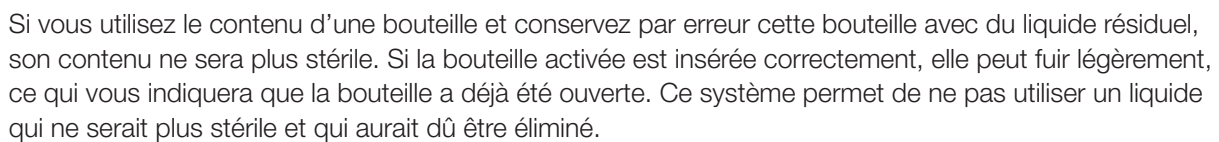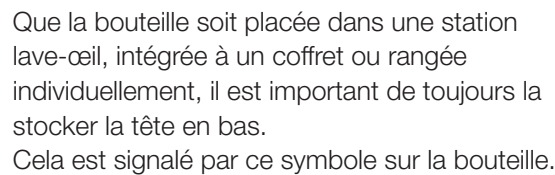

Soyez toujours attentif aux pictogrammes et aux symboles présents sur la bouteille pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.



La
signification
des
symboles

Placer les bouteilles qui **ne sont pas** utilisées avec un coffret ou une station

Support mural – pour bouteilles de 200 ml et 500 ml – ne convient pas aux bouteilles DUO



Support mural vert

Conditionnement : 1 pièce

Réf. : 956430

Support mural pour Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride 200 ml et 500 ml (réf. 4691, 4604)



Support mural bleu

Conditionnement : 1 pièce

Réf. : 956431

Support mural pour Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate 200 ml (réf. 4752)

Crochet mural – pour toutes les bouteilles de 500 ml et 1000 ml



Crochet mural vert

Conditionnement : 1 pièce

Réf. : 956466

Crochet mural pour Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride 500 ml et 1000 ml (réf. 4604, 4707, 4861 et 4800)



Crochet mural bleu

Conditionnement : 1 pièce

Réf. : 956407

Crochet mural pour Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO 500 ml (réf. 4801)



Lave-œil et nettoyant plaies en cas de corps étrangers

Ce lave-œil et nettoyant plaies est une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % qui soulage l'inconfort et prévient les complications ultérieures causées par des corps étrangers dans les plaies ou les yeux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Élimine efficacement la poussière, la saleté et les contaminants des plaies ou des yeux
- Facile à manipuler : peut être appliqué par la personne blessée ou avec assistance
- Solutions flexibles : bouteilles pour usage mobile et stations murales
- CEillères ergonomiques offrant un flux doux et agréable
- Large champ d'application : des postes de travail industriels aux laboratoires et trousse de premiers soins
- Grande fiabilité fonctionnelle
- Le produit possède le marquage CE conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
- Durée de conservation : 3,5 ans



200 ML / 500 ML / 1000 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE

Les bouteilles contiennent une solution stérile et peuvent être utilisés individuellement ou comme recharges dans les stations et les coffrets. La bouteille de 200 ml se range facilement dans la sacoche-ceinture spécialement conçue, dans le kit de premiers soins, dans une boîte à outils, etc.

Contenu : 200 ml
Conditionnement : 10 x 200 ml
Réf. : 4691

Contenu : 500 ml
Conditionnement : 12 x 500 ml
Réf. : 4604

Contenu : 1000 ml
Conditionnement : 6 x 1000 ml
Réf. : 4707

Conditionnement : 3 x 500 ml
Réf. : 4613



5 RECHARGES DE 20 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE

5 ampoules contenant 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %. Pour une utilisation individuelle ou en tant que recharge pour distributeurs Plum QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse ou Plum QuickRinse.

Contenu : 5 x 20 ml
Conditionnement : 4 x 5 x 20 ml
Réf. : 5160



500 ML / 1000 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE DUO

L'œillère ergonomique DUO permet de rincer les deux yeux en même temps.

Contenu : 500 ml
Conditionnement : 6 x 500 ml
Réf. : 4861

Contenu : 1000 ml
Conditionnement : 6 x 1000 ml
Réf. : 4800



200 ML / 500 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE – BOÎTES INDIVIDUELLES

La boîte protège la bouteille. Convient aux postes de travail mobiles ou à la recharge de stations.

Contenu : 200 ml
Conditionnement : 10 x 200 ml
Réf. : 4695

Contenu : 500 ml
Conditionnement : 12 x 500 ml
Réf. : 4605

3 X 500 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE – ON-THE-GO

Kit pratique et maniable comprenant 3 bouteilles de lave-œil et nettoyant plaies. Facile à transporter en voiture ou sur le trajet vers un médecin ou un service d'urgences.

Contenu : 3 x 500 ml
Conditionnement : 4 x 3 x 500 ml
Réf. : 4620

En cas d'accident chimique

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate neutralise les acides et les bases, et les élimine rapidement de la plaie ou de l'œil lors du rinçage.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Effet neutralisant rapide : minimise les conséquences des accidents impliquant des acides et des bases
- Facile à manipuler : peut être appliqué par la personne blessée ou avec assistance
- Solutions flexibles : bouteilles pour usage mobile et stations murales
- Large champ d'application : des postes de travail industriels aux laboratoires et trousse de premiers soins
- Grande fiabilité fonctionnelle
- Le produit possède le marquage CE conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
- Durée de conservation : 3,5 ans



IMPORTANT

Ne pas utiliser ce produit en cas d'incident impliquant des éblouissements contenant de l'acide fluorhydrique, de l'hypochlorite de calcium ou de l'hypochlorite de sodium (agents blanchissants).

LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX SONT PARTOUT

De nombreux métiers, entreprises et industries sont confrontés à un risque d'exposition à des plaies graves et à des lésions oculaires graves causées par des produits chimiques, par exemple dans les usines chimiques, l'industrie du recyclage, sur les chantiers de construction et dans l'industrie minière. L'usage d'un lave-œil neutralisant est nécessaire pour minimiser les séquelles de l'accident.

Les acides et les bases peuvent dégrader la structure de la peau et des muqueuses. La gravité des blessures par corrosion dépend principalement de :

- la concentration du produit chimique : les acides forts et les bases fortes sont extrêmement corrosifs ;
- la température : une température élevée augmente les propriétés corrosives des produits chimiques ;
- la durée du contact : plus le contact est prolongé, plus la matière dangereuse pénètre profondément.

QUELQUES SECONDES PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE

En cas de blessures cutanées ou oculaires impliquant des acides et des bases, il est crucial de neutraliser le produit chimique le plus rapidement possible jusqu'à un pH d'environ 7,4, correspondant au pH normal du liquide oculaire, avant que l'acide ou la base n'ait pénétré la cornée ou la peau.

Pour optimiser la sécurité en cas de risque de blessures dues à des acides et des bases, la solution lave-œil et nettoyant plaies doit être :


- facilement accessible,
- rapide à utiliser,
- efficace.

UN LAVE-ŒIL ET NETTOYANT PLAIES RAPIDE ET EFFICACE EST ESSENTIEL

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate est une solution tampon qui neutralise rapidement et efficacement même les acides forts et les bases fortes. Le liquide est composé des mêmes sels de phosphate présents dans le corps humain. Le tampon phosphate d'hydrogène est efficace contre les acides, tandis que le tampon phosphate de dihydrogène réagit contre les bases. L'efficacité de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate a été documentée dans des études scientifiques.^{1) 2)}

Nous avons testé l'effet neutralisant de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate sur des acides et bases forts, et l'avons comparé à l'effet d'un lave-œil salin à 0,9 % de chlorure de sodium. Le test montre clairement que Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate neutralise rapidement les acides et les bases jusqu'à un niveau de pH inoffensif. Le lave-œil salin dilue le liquide, mais modifie peu la valeur du pH (figure 1).

Figure 1 : Effet neutralisant de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate et de 0.9% Sodium Chloride

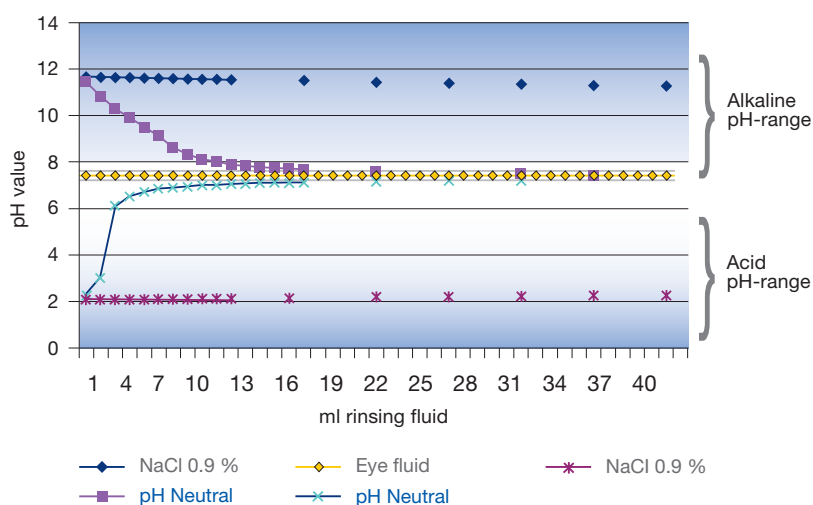

1 : Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2 : Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von Plum pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.



**200 ML – BOÎTE INDIVIDUELLE
PLUM WOUND AND
EYEWASH PH NEUTRAL 4.9%
PHOSPHATE**

Bouteilles contenant une solution tampon stérile de phosphate à 4,9 % sans borate, qui neutralise rapidement les acides et les bases. Elles peuvent être utilisées individuellement ou comme recharges dans les stations et les coffrets.

La boîte protège la bouteille et est adaptée à la recharge de stations et aux postes de travail mobiles.

Contenu : 200 ml
Conditionnement : 10 x 200 ml
Réf. : 4755



**200 ML
PLUM WOUND AND EYEWASH
PH NEUTRAL 4.9% PHOSPHATE**

La bouteille de 200 ml s'utilise facilement dans le coffret de premiers soins, dans une boîte à outils, etc.

Contenu : 200 ml
Conditionnement : 10 x 200 ml
Réf. : 4752



**500 ML
PLUM WOUND AND
EYEWASH PH NEUTRAL 4.9%
PHOSPHATE DUO**

La bouteille de 500 ml est fournie avec une œillère ergonomique DUO, qui permet de rincer les deux yeux en même temps.

Contenu : 500 ml
Conditionnement : 6 x 500 ml
Réf. : 4801

UTILISATION RECOMMANDÉE DE PLUM WOUND AND EYEWASH PH NEUTRAL 4.9% PHOSPHATE

Cette solution lave-œil et nettoyant plaies est destinée aux accidents impliquant des acides et des bases. Rincez avec Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate pour neutraliser aussi rapidement que possible la valeur de pH de la matière dangereuse jusqu'à un niveau inoffensif. Poursuivez le rinçage avec Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences.



**” LES ACCIDENTS
IMPLIQUANT DES
ACIDES ET DES BASES
SE PRODUISENT
QUAND ON LES ATTEND
LE MOINS**

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO a sauvé la vue d'une employée de SITA France. L'entreprise traite des déchets plastiques tels que des bouteilles en plastique contenant des détergents. Le liquide d'une bouteille de détergent a été projeté dans les yeux de l'employée. Grâce à cette solution lave-œil, la matière dangereuse a été neutralisée et l'employée a pu retourner au travail dès le lendemain.



Plum Wound and Eyewash Spray est une gamme composée de vaporisateurs à base de solution saline, faciles à transporter comme à utiliser. Ils peuvent être administrés dans toutes les positions et délivrent un débit régulier et doux. Ils sont idéalement adaptés à une utilisation dans le secteur industriel et de la production, en laboratoire, pour le transport de marchandises dangereuses, par les équipes d'intervention d'urgence, forces de l'ordre, pompiers, militaires et les services de premiers secours.

Plum Wound and Eyewash Spray

Rapide et facile à utiliser en quelques secondes :
pour la peau et les yeux !

Le spray lave-œil et nettoyant plaies est utilisé comme soin doux pour les accidents mineurs, tels que les coupures et éraflures sur la peau, ou pour rincer la poussière et les salissures présentes dans les plaies et les yeux. Il permet un rinçage sûr, à la fois rapide et facile, à une seule main. Le capuchon anti-poussière protège la buse de vaporisation contre la contamination, le vaporisateur est adapté à une utilisation multiple et le récipient est entièrement recyclable.

Une solution facile et rapide afin de minimiser le risque d'infection supplémentaire ou d'aggravation.



Nettoyez la buse avant utilisation en pulvérisant brièvement dans l'air.



Placez la buse à au moins de 10 cm de la plaie ou de l'œil. Appuyez sur la buse et pulvériser. Évitez tout contact entre la buse et la plaie ou l'œil.





50 ML / 250 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY

Solution de chlorure de sodium à 0,9 % offrant un premier soin immédiat pour les accidents mineurs tels que les coupures ou éraflures sur la peau ou la pénétration de poussières ou salissures dans les yeux. Cette solution permet de minimiser le risque d'infection supplémentaire ou d'aggravation.



250 ML

SUPPORT MURAL

Améliorez la visibilité de votre équipement de premiers soins en accrochant au mur les vaporisateurs Plum Wound and Eyewash Spray. Ce simple support mural vous fera gagner de précieuses minutes en cas de blessure aux yeux ou à la peau. Ainsi, vous n'aurez pas à chercher votre Plum Wound and Eyewash Spray, car il sera à portée de main.

Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIa conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Plum Wound and Eyewash Spray

Contenu : 50 ml
Conditionnement : 24 x 50 ml
Réf. : 45530
Langues : en, de, sv, da, fr, no
 fi, pt, it, nl, es, pl, is


Contenu : 250 ml
Conditionnement : 12 x 250 ml
Réf. : 4554
Support mural : 4123

Support pour vaporisateur 250 ml

Contenu : 1
Conditionnement : 24 pièces
Réf. : 4123

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Stérile jusqu'à épuisement – permet une utilisation répétée
- Application rapide et facile, à une seule main
- Rinçage sûr
- Capuchon anti-poussière pour protéger la buse de vaporisation contre la contamination
- Facile à transporter, catégorie des aérosols non inflammables
- 100 % du produit utilisable
- Récipient entièrement recyclable
- Solution hypoallergénique et stérile sans conservateurs
- Durée de conservation : 3,5 ans

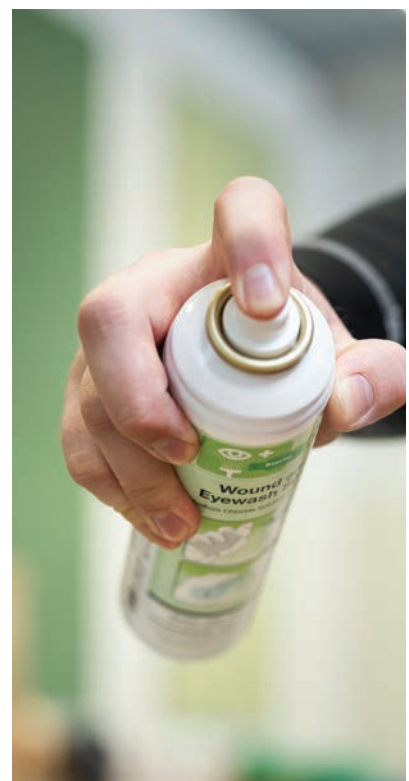

Stations ouvertes

La solution murale ouverte offre une bonne vue d'ensemble et un accès rapide et facile aux premiers soins

PROTÉGEZ VOS COLLÈGUES, RENDEZ LES PREMIERS SOINS ACCESSIBLES

Lorsqu'un accident se produit, il est trop tard pour chercher de l'aide dans une boîte ou dans une armoire.

Systématisez les premiers soins à l'aide d'une station murale, pour un accès facile en cas d'accident. Vous avez le choix entre une station murale ouverte et une solution en coffret. Ce dernier format est particulièrement adapté aux environnements poussiéreux afin de protéger les bouteilles et éviter d'ajouter davantage de poussière à l'accident.

Assurez-vous d'avoir d'autres bouteilles à disposition afin de poursuivre le rinçage sur le trajet vers l'étape de traitement suivante.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Premiers soins visibles et facilement accessibles
- Se monte facilement au mur à proximité du lieu de travail, là où un rinçage immédiat peut être nécessaire
- Garantit une aide rapide et efficace



PLUM OPEN STATION SINGLE

Station murale avec 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Particulièrement adaptée aux environnements de travail restreints ou mobiles.

Conditionnement :	1
Réf. :	4611
Recharge 500 ml, réf. :	4604
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Plaque de montage	H : 29 x L : 13,5 cm



PLUM OPEN STATION SINGLE

Station murale avec 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Particulièrement adaptée aux environnements de travail restreints ou mobiles où un rinçage prolongé des deux yeux peut être nécessaire.

Conditionnement :	1
Réf. :	4802
Recharge 1000 ml, réf. :	4800
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Plaque de montage	H : 29 x L : 13,5 cm



PLUM OPEN STATION DOUBLE

Station murale avec 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate et 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride.

Particulièrement adaptée aux lieux où il existe un risque d'exposition à la fois à des corps étrangers et à des acides et bases dans les yeux ou sur les plaies.

Conditionnement :	1
Réf. :	4770
Recharge 200 ml, réf. :	4752
Recharge 500 ml, réf. :	4604 / 4613
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Plaque de montage	H : 29 x L : 22,8 cm



PLUM OPEN STATION DOUBLE

Station murale avec 500 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO et 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Particulièrement adaptée aux lieux où il existe un risque d'exposition à la fois à des corps étrangers et à des acides et bases dans les yeux ou sur les plaies, et où les deux yeux pourraient être affectés.

Conditionnement :	1
Réf. :	4803
Recharge 500 ml, réf. :	4801
Recharge 1000 ml, réf. :	4800
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Plaque de montage	H : 29 x L : 22,8 cm



PLUM OPEN STATION DOUBLE

Station murale avec 2 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Particulièrement adaptée aux environnements propres et aux petits postes de travail où il existe un risque d'intrusion de corps étrangers dans les yeux ou les plaies.

Conditionnement :	1
Réf. :	4694
Recharge 500 ml, réf. :	4604
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Plaque de montage	H : 29 x L : 22,8 cm



PLUM OPEN STATION DOUBLE

Station murale avec 2 x 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Particulièrement adaptée aux environnements où un rinçage prolongé peut s'avérer requis.

Conditionnement :	1
Réf. :	4708
Recharge 1000 ml, réf. :	4707
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Plaque de montage	H : 29 x L : 22,8 cm

La bouteille verte Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride vous aide à éliminer la saleté et les corps étrangers.

La bouteille bleue Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate apporte un premier soin immédiat en cas d'accidents graves impliquant des acides et des bases.

Les bouteilles souples sont faciles à manipuler et permettent un rinçage doux et régulier de l'œil ou de la plaie

Pictogrammes et symboles clairs expliquant comment placer et manipuler la bouteille

Œillère ergonomique en plastique souple épousant la courbure de l'œil. Pressez-la avant de la placer sur votre œil. L'œillère aide à maintenir l'œil ouvert et garantit un flux de liquide idéal et un temps de rinçage optimal

Ouverture rapide et facile. Un simple pivotement rompt le sceau : la bouteille est prête pour le rinçage

Instructions d'utilisation claires

Produit économique avec une longue durée de conservation de 3,5 ans. Date de péremption clairement affichée sur l'étiquette

L'œillère DUO ergonomique permet de rincer les deux yeux en même temps. L'œillère aide à maintenir les yeux ouverts et délivre un flux de liquide optimal, pour un temps de rinçage minimal

Remarque : tous les matériaux utilisés sont en PE-LD, qui est recyclable



Un accès rapide au lave-œil et nettoyant plaies est crucial dans tous les lieux de travail présentant un risque de blessures oculaires, car chaque seconde compte pour limiter l'impact d'un accident.


VOUS N'AVEZ QUE DEUX YEUX : PRENEZ-EN SOIN

Votre vue est l'un de vos sens les plus importants. Prenez soin de vos yeux ! Malgré toutes les précautions, les accidents peuvent arriver. Soyez préparé aux accidents en disposant de premiers soins adaptés et placés au bon endroit. Une solution lave-œil placée dans les zones à risque élevé est la meilleure préparation contre les blessures oculaires.

UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE RINÇAGE UNIQUES

Notre priorité absolue est de vous aider à améliorer la sécurité de votre lieu de travail. Ainsi, nos solutions sont développées en collaboration étroite avec des spécialistes des yeux.

Cela nous a permis de concevoir des produits sans négliger le moindre détail. Faciles à utiliser, ils disposent de pictogrammes d'instruction détaillant clairement leur utilisation correcte. L'œillère aide à maintenir l'œil ouvert. Le liquide de rinçage atteint l'œil au bon endroit, en quantité appropriée et avec un flux doux et régulier.

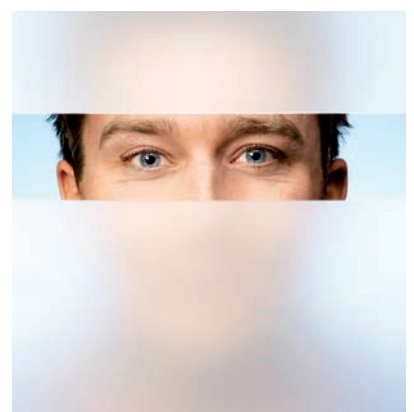

Les produits possèdent le marquage CE conformément aux directives de classification du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Plum iBox

- conçu pour votre sécurité


Livré avec support mural et kit de fixation



Aperçu rapide et efficace des bouteilles lave-œil et des dates de péremption

Décrochez Plum iBox du support mural et apportez-le rapidement à la personne blessée

Solutions rapidement accessibles

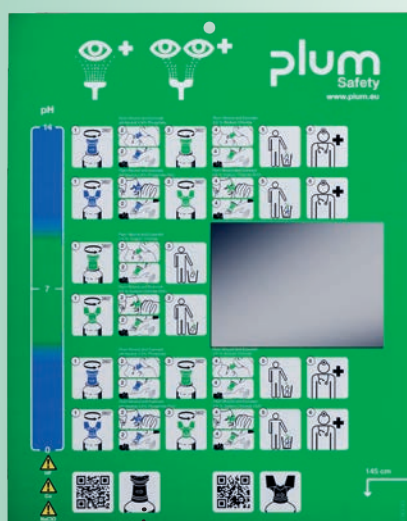

Livré avec un plan d'utilisation

Matériau solide et durable (EPP)



Son design spacieux permet de saisir les bouteilles rapidement et facilement

S'ouvre facilement, monté au mur ou posé au sol



Coffret étanche à la poussière et portable



Plum iBox allie des fonctionnalités essentielles à un design moderne et est conçu dans un matériau solide et durable. Son couvercle avec fenêtre transparente permet de contrôler les dates de péremption en un coup d'œil.

Détachez Plum iBox du mur et apportez rapidement le lave-œil à la personne blessée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Bouteilles clairement visibles
- Vue d'ensemble rapide et efficace des dates de péremption et de l'état des produits
- Coffret étanche à la poussière - IP55
- Retrait du support mural pour apporter rapidement le coffret à la personne blessée
- Design spacieux permettant de saisir les bouteilles rapidement et facilement
- S'ouvre facilement, monté au mur ou posé au sol
- Matériau solide et durable (EPP)
- Livré avec support mural, plan d'utilisation et kit de fixation murale



PLUM IBOX 1

Coffret avec 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.



PLUM IBOX 1

Coffret avec 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride.



PLUM IBOX 1 – VIDE

Adapté pour une bouteille de votre choix.

Conditionnement : 1
Réf. : 4901
Recharge 1000 ml, réf. : 4800
Dimensions :
Plan d'utilisation H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 1 H : 42,5 x L : 18,6 x P : 13,5 cm

Conditionnement : 1
Réf. : 4902
Recharge 500 ml, réf. : 4604 / 4613
Dimensions :
Plan d'utilisation H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 1 H : 42,5 x L : 18,6 x P : 13,5 cm

Conditionnement : 1
Réf. : 4900
Dimensions :
Plan d'utilisation H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 1 H : 42,5 x L : 18,6 x P : 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Coffret avec 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate et 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride.

Conditionnement :	1
Réf. :	4921
Recharge 200 ml, réf. :	4752
Recharge 500 ml, réf. :	4604 / 4613
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 2	H : 42,5 x L : 29 x P : 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Coffret avec 2 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride.

Conditionnement :	1
Réf. :	4922
Recharge 500 ml, réf. :	4604 / 4613
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 2	H : 42,5 x L : 29 x P : 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Coffret avec 500 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO et 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.

Conditionnement :	1
Réf. :	4923
Recharge 500 ml, réf. :	4801
Recharge 1000 ml, réf. :	4800
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 2	H : 42,5 x L : 29 x P : 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Coffret avec 2 x 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.

Conditionnement :	1
Réf. :	4924
Recharge 1000 ml, réf. :	4800
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 2	H : 42,5 x L : 29 x P : 13,5 cm



PLUM IBOX 2 – VIDE

Coffret adapté pour deux bouteilles de votre choix.


Conditionnement :	1
Réf. :	4920
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 2	H : 42,5 x L : 29 x P : 13,5 cm



PLUM IBOX 3

Coffret avec 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO et 250 ml de Plum Wound and Eyewash Spray.

Conditionnement :	1
Réf. :	4931
Recharge 500 ml, réf. :	4604 / 4613
Recharge 200 ml, réf. :	4752
Recharge 1000 ml, réf. :	4800
Recharge de vaporisateur 250 ml, réf. :	4554
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 3	H : 47,5 x L : 37,6 x P : 13,5 cm

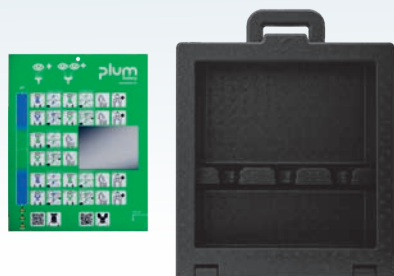

PLUM IBOX 3 – VIDE

Coffret adapté pour trois bouteilles de lave-œil et nettoyant plaies et une bouteille de vaporisateur.

Conditionnement :	1
Réf. :	4930
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
iBox 3	H : 47,5 x L : 37,6 x P : 13,5 cm

Coffrets verts étanches à la poussière

Une station fermée protège votre équipement de premiers soins contre les salissures et la poussière, et garde les produits prêts à l'emploi.



PLUM GREEN BOX

Coffret avec 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate et 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride.

Conditionnement :	1
Réf. :	4789
Recharge 200 ml, réf. :	4752
Recharge 500 ml, réf. :	4604 / 4613
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Coffret vert	H : 28 x L : 23 x P : 11 cm

Coffret mural fabriqué dans un matériau sans entretien, pour des premiers soins rapides et légers en cas de blessure. Dans toutes les circonstances, une réaction rapide est généralement nécessaire lorsque l'œil ou la plaie est exposé(e). Vous devez donc être bien préparé, avec les produits de premiers soins appropriés sur le lieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Stations murales étanches à la poussière en polystyrène à haute résistance
- Premiers soins visibles et facilement accessibles
- Lave-œil et nettoyant plaies rapide et efficace
- Montage simple et rapide au mur à proximité du poste de travail
- Peut être installé directement là où un rinçage immédiat est nécessaire
- Fourni avec pictogrammes clairs et miroir
- Particulièrement adapté aux zones de production poussiéreuses et sales



PLUM GREEN BOX

Coffret avec 2 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride.

Conditionnement :	1
Réf. :	4650
Recharge 500 ml, réf. :	4604 / 4613
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Coffret vert	H : 28 x L : 23 x P : 11 cm



PLUM GREEN BOX

Coffret avec 500 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO et 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.

Conditionnement :	1
Réf. :	4862
Recharge 500 ml (bleu), réf. :	4801
Recharge 500 ml (vert), réf. :	4861
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Coffret vert	H : 28 x L : 23 x P : 11 cm



PLUM GREEN BOX LARGE

Coffret avec 500 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO et 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.

Conditionnement :	1
Réf. :	4810
Recharge 500 ml, réf. :	4801
Recharge 1000 ml, réf. :	4800
Dimensions :	
Plan d'utilisation	H : 29 x L : 22,8 cm
Coffret vert	H : 35,7 x L : 25,2 x P : 11,6 cm

Le système de fermeture en douceur facilite l'ouverture et la fermeture du coffret et le protège de la poussière et des salissures environnantes



Fabriqué en polystyrène expansé, un matériau léger, isolant et écoresponsable.


Il est produit avec une quantité de plastique réduite par rapport à une conception 100 % plastique.

Une fois remplacé, le coffret peut être mis au rebut par incinération

Facile à monter à proximité du poste de travail

Les supports moulés s'adaptent à toutes nos bouteilles, qu'elles soient équipées d'œillets classiques ou DUO, et les maintiennent solidement en place

Son conditionnement intégré au produit lui a valu, pour son caractère novateur, la distinction « Worldstar Winner »

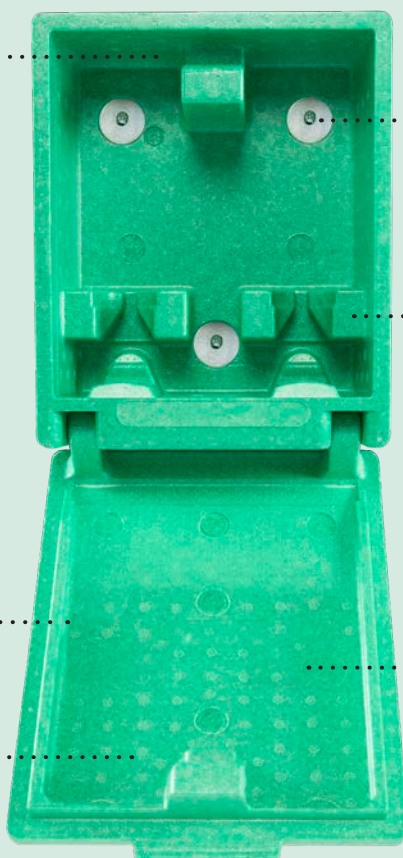

PLUM GREEN BOX LARGE

Coffret avec 2 x 1000 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO.

Conditionnement : 1
Réf. : 4816
Recharge 1000 ml, réf. : 4800
Dimensions :
Plan d'utilisation H : 29 x L : 22,8 cm
Coffret vert H : 35,7 x L : 25,2 x P : 11,6 cm



Livré vide

PLUM GREEN PLUG & HEAT BOX

Coffret étanche à la poussière avec élément chauffant. Garantit que le liquide est à une température confortable pour la douche. Adapté pour 2 bouteilles de 200 ml et/ou 500 ml.

Conditionnement : 1
Réf. : 4672
Dimensions :
Plan d'utilisation H : 29 x L : 22,8 cm
Coffret chauffant H : 28 x L : 23 x P : 11 cm

MAINTENEZ LA BONNE TEMPÉRATURE

Quelle qu'en soit la raison, une aide rapide est le plus souvent nécessaire lorsqu'un corps étranger atteint l'œil ou la plaie. Par conséquent, la préparation doit être en place et facilement accessible sur le lieu de travail, même par temps froid.



PLUM EXTREME COLD BAG

Cette trousse offre une protection thermique supplémentaire pour le Plum Green Plug & Heat Box.

Conditionnement : 1
Réf. : 4550



Pour une décontamination rapide et efficace du corps et des surfaces en contact avec des substances dangereuses corrosives et toxiques telles que les acides et les bases forts, les oxydants, le formaldéhyde, les phénols, les solvants organiques, l'acide fluorhydrique et les fluorures.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Pour les premiers soins après contact avec des substances dangereuses directement sur le lieu de l'accident
- Effet très rapide
- Manipulation facile
- La coloration rouge de la zone pulvérisée met en évidence la désactivation des agents oxydants
- Durée de conservation : 3 ans à partir de la date de fabrication Particulièrement adapté aux zones de production poussiéreuses et sales

Plum BodyNeutrAll

Douche de corps mobile avec une solution de décontamination hautement efficace pour la peau, les surfaces et les vêtements.

Les substances actives contenues dans Plum BodyNeutrAll sont l'acide ascorbique, un tampon d'acide aminé et des ions calcium. La glycérine, le polyéthylène et le glycol servent de solubilisants pour les produits organiques.

PLUM BODYNEUTRALL DOIT SON EFFICACITÉ, ENTRE AUTRES, AUX SUBSTANCES SUIVANTES :

- ✓ L'acide ascorbique pour neutraliser (par une réaction d'oxydoréduction) les substances fortement oxydantes telles que le peroxyde d'hydrogène, le brome élémentaire, la lessive de blanchiment au chlore, l'hypochlorite de calcium, les gaz nitreux, les nitrates et bien d'autres encore
- ✓ Tampon d'acide aminé pour la neutralisation d'acides et de bases tels que l'acide sulfurique, la soude caustique, l'acide nitrique ou l'acide chlorhydrique
- ✓ L'acide aminé glycine pour la fixation du formaldéhyde et des phénols
- ✓ Chlorure de calcium pour la précipitation du fluorure sous forme de fluorure de calcium insoluble, ce qui permet également d'inactiver l'acide fluorhydrique
- ✓ En outre, le polyéthylène glycol et le glycérol comme solubilisant pour les produits chimiques organiques

AUTORISATION/APPROBATION DE LA SOLUTION DE DÉCONTAMINATION :

- Certification en tant que dispositif médical de classe I. Conformément aux exigences du règlement (UE) 2017/745.
 - Officiellement enregistré par l'Office fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux de l'Allemagne sous le numéro DE/CA32/00149466.
- L'enregistrement est valable pour l'ensemble de l'UE et peut donc porter le marquage CE en conséquence.
- Conforme à la norme DIN 14555-12 pour l'équipement de transport de marchandises dangereuses.



N'utilisez pas le produit dans les yeux, sur les muqueuses ou sur les lésions de la peau.
N'utilisez pas le produit pour les accidents impliquant de l'acide sulfurique concentré. En cas de contact, rincez à l'eau ou à l'aide d'une solution de rinçage stérile.



PLUM BODYNEUTRALL 5 L

Vaporisateur vide de 5 l, livré avec un bidon de solution mélangée pour remplir le vaporisateur. Il convient aux grandes surfaces jusqu'à 50 m² et couvre plusieurs personnes.

Conditionnement : 1
Réf. : 4735
Dimensions :
 Vaporisateur H : 57 (avec la lance : 80) x
 L : 22 cm,
 Diamètre 18 cm



PLUM BODYNEUTRALL 600 ML

Deux bouteilles de 300 ml à mélanger et à utiliser avec une tête de vaporisateur. Facile à utiliser sur de petites surfaces jusqu'à 6 m² ou pour jusqu'à 3 personnes.


Conditionnement : 4
Réf. : 4736
Dimensions :
 2 bouteilles avec tête
 du vaporisateur : H : 29 x L : 11 x P : 6 cm



PLUM BODYNEUTRALL 100 ML

Bouteilles mixte au format de poche à emporter, couvrant environ 1 m² ou la longueur d'un bras.

Conditionnement : 6
Réf. : 4737
Dimensions : H : 13 x L : 6,5 x P : 3,1 cm

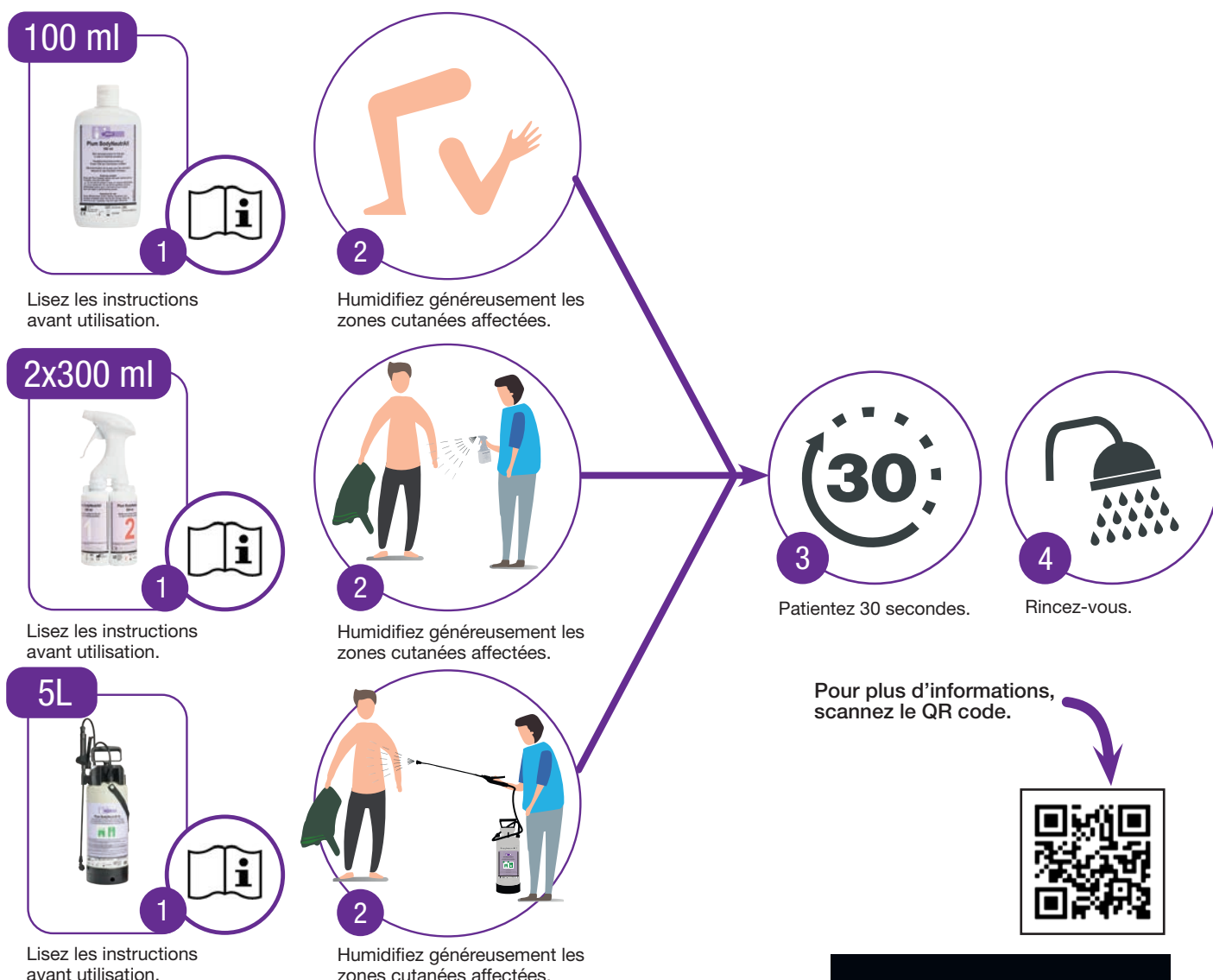

plum QuickFix



Une assistance rapide pour vos accidents légers du quotidien

Installez le distributeur de pansements au mur et gagnez un temps précieux. Pansement appliqué en un tour de main et retour au travail !

AIDE RAPIDE ET HYGIÉNIQUE EN CAS DE BLESSURES MINEURES

Ne perdez plus de temps avec les lésions mineures. Attrapez un pansement dans le distributeur, posez-le et remettez-vous au travail ! Plum QuickFix résout le problème de manière facile, hygiénique et efficace.

De nombreux accidents mineurs se produisent chaque jour au travail, pour lesquels un simple pansement suffit. Choisissez le pansement adapté à votre situation de travail. Une solution adaptée est disponible, que vous ayez besoin de pansements pour les situations de travail courantes, pour des environnements très humides ou pour le secteur agroalimentaire.



PLUM QUICKFIX EST UN DISTRIBUTEUR UNIQUE

- Accès immédiat et visible à des pansements et ampoules de lave-œil
- Chaque pansement est prêt à l'usage en un geste
- Application à une main
- Recharge facile selon les besoins
- Facile de voir lorsque le distributeur est vide
- Arrête rapidement les saignements mineurs
- Petites dimensions, facile à placer

Système flexible pour tous les types d'activité

Plum QuickFix offre une approche structurée aux premiers soins pour les blessures légères

CHOISISSEZ VOTRE DISTRIBUTEUR IDÉAL

Notre gamme de distributeurs de pansements Plum QuickFix comporte deux types de distributeurs conçus différemment. Ils ont été développés pour différents environnements de travail et peuvent être rechargés avec différentes combinaisons de pansements et d'ampoules de lave-œil afin de répondre aux besoins de tous les environnements de travail.



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX

Le distributeur vert classique contient deux recharges de pansements Plum QuickFix et/ou des ampoules Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse. Le capot vert protège le contenu du distributeur contre la poussière et les salissures du lieu de travail. Il est pourvu d'une étagère intérieure pour les petits objets et est verrouillable avec un cadenas et une clé.

Le distributeur peut être utilisé partout où se présente un risque de blessures et éraflures. Le distributeur est conçu pour une installation dans tous types de postes de travail fixes.

Dimensions : H : 135 x L : 230 x P : 32 mm



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX UNO – SANS RECHARGE, BLANC

Conditionnement 10
Réf. : 5534



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX UNO – SANS RECHARGE, TRANSPARENT

Conditionnement 10
Réf. : 5533



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX SOLO® – SANS RECHARGE, TRANSPARENT

Conditionnement 2
Réf. : 5535

DISTRIBUTEURS PLUM QUICKFIX UNO ET PLUM QUICKFIX SOLO®

Les distributeurs de pansements Plum QuickFix Uno et Plum QuickFix Solo® sont conçus pour les lieux de travail qui ne sont pas exposés à la poussière et à la saleté. Il s'agit de petits distributeurs modernes au design unique qui combinent sécurité sur le lieu de travail et style contemporain.

Plum QuickFix Uno :
Dimensions : H : 85 x L : 130 x P : 35 mm

Plum QuickFix Solo® :
Dimensions : H : 80 x L : 130 x P : 27 mm



Distributeur de pansements Plum QuickFix



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

Distributeur comprenant
90 pansements résistants à l'eau
et adaptés aux environnements à
forte humidité.

Conditionnement : 10
Réf. : 5501
Réf. recharge : 5511



PLUM QUICKFIX ELASTIC ET WATER RESISTANT

Distributeur comprenant
45 pansements élastiques et
45 pansements résistants à
l'eau.

Conditionnement : 10
Réf. : 5507
Réf. recharge : 5512 & 5511



PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Distributeur de 90 pansements
Blood Stopper à effet
hémostatique.

Conditionnement : 10
Réf. : 5510
Réf. recharge : 5516



PLUM QUICKFIX ALOE VERA

Distributeur comprenant
90 pansements à l'aloë vera, qui
apaisent et hydratent la peau.

Conditionnement : 10
Réf. : 5506
Réf. recharge : 5514



PLUM QUICKFIX ELASTIC

Distributeur contenant
90 pansements élastiques
s'adaptant aux mouvements de la
peau.

Conditionnement : 10
Réf. : 5502
Réf. recharge : 5512



PLUM QUICKFIX DETECTABLE

Distributeur contenant
90 pansements bleus avec
surface métallique intégrée,
détectables au détecteur de
métaux.

Conditionnement : 10
Réf. : 5503
Réf. recharge : 5513



PLUM QUICKFIX XRAY

Distributeur contenant
90 pansements XRay, résistants
à l'eau et détectables aux
rayons X ainsi qu'au détecteur de
métaux.

Conditionnement : 10
Réf. : 5537
Réf. recharge : 5524



PLUM QUICKFIX BLACK

Distributeur contenant
90 pansements noirs en PE et
respirants.

Conditionnement : 10
Réf. : 5536
Réf. recharge : 5522



PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

Distributeur contenant
60 pansements longs et élastiques,
pouvant être enroulés plusieurs fois
autour du doigt.

Conditionnement : 10
Réf. : 5528
Réf. recharge : 5508



PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

Distributeur contenant
60 pansements longs bleus
avec surface métallique intégrée,
détectables au détecteur de
métaux.

Conditionnement : 10
Réf. : 5529
Réf. recharge : 5509



PLUM QUICKFIX XRAY LONG

Distributeur contenant
60 pansements longs XRay,
résistants à l'eau et détectables
aux rayons X ainsi qu'au
détecteur de métaux.

Conditionnement : 10
Réf. : 5539
Réf. recharge : 5525




PLUM QUICKFIX BLACK LONG

Distributeur contenant
60 pansements longs noirs en
PE, respirants.

Conditionnement : 10
Réf. : 5538
Réf. recharge : 5523

Utiliser le distributeur de pansements

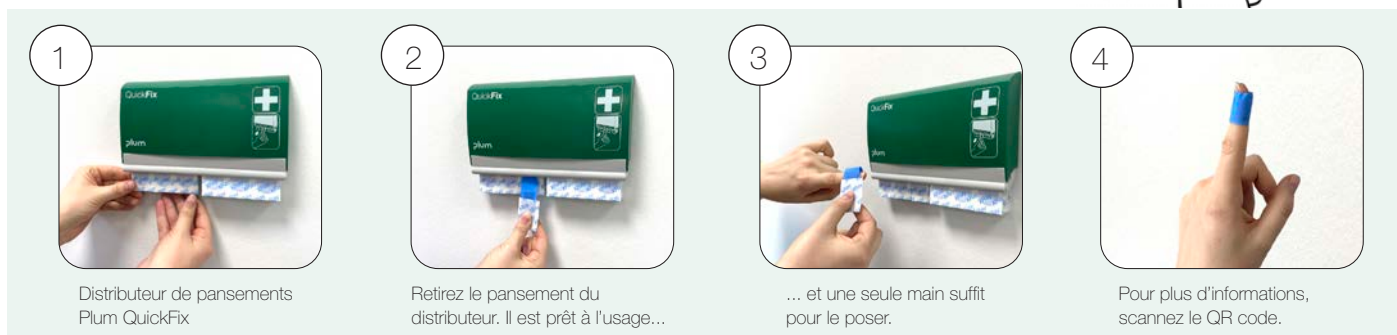

Plum QuickFix Uno et Plum QuickFix Solo®



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX UNO ELASTIC – BLANC

Distributeur blanc brillant comprenant 45 pansements élastiques s'adaptant aux mouvements de la peau. Les pansements sont doux pour la peau et laissent celle-ci respirer.

Conditionnement : 10
Réf. : 5532



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX UNO ELASTIC – TRANSPARENT

Distributeur transparent comprenant 45 pansements élastiques et confortables s'adaptant aux mouvements de la peau. Les pansements sont doux pour la peau et laissent celle-ci respirer.

Conditionnement : 10
Réf. : 5531



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX SOLO® – TRANSPARENT

Distributeur Plum QuickFix Solo® – sans recharge, transparent

Conditionnement : 2
Réf. : 5535

CHOISISSEZ VOTRE DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS PLUM QUICKFIX POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS ÉCIFIQUES

Remplissez le distributeur avec les pansements de votre choix. Toutes les recharges de pansements QuickFix peuvent être utilisées selon vos propres besoins. Le distributeur peut également être utilisé avec une recharge Plum QuickRinse.



PLUM QUICKFIX&RINSE

Distributeur comprenant 45 pansements élastiques et 5 ampoules de 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

Conditionnement : 10
Réf. : 4631
Réf. recharge : 5512 & 5160



PLUM QUICKRINSE

Distributeur comprenant 10 ampoules de lave-œil contenant 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

Conditionnement : 10
Réf. : 4632
Réf. recharge : 5160



DISTRIBUTEUR PLUM QUICKFIX – VIDE

Distributeur sans recharge. À remplir avec une recharge Plum QuickFix ou Plum QuickRinse de votre choix.

Conditionnement : 10
Réf. : 5500

Recharges de pansements Plum QuickFix



PLUM QUICKFIX ELASTIC

45 pansements textiles élastiques et confortables s'adaptant aux mouvements de la peau. Les pansements sont doux pour la peau et laissent celle-ci respirer. Les pansements sont fabriqués à partir d'un matériau respirant.



PLUM QUICKFIX DETECTABLE

45 pansements bleus facilement visibles avec un insert métallique intégré, détectable au détecteur de métaux. Particulièrement adaptés à l'industrie agroalimentaire. Les pansements sont fabriqués à partir d'un matériau respirant.



PLUM QUICKFIX XRAY

45 pansements bleus en PE, détectables aux rayons X, avec insert en aluminium contenant du sulfate de baryum. Les pansements sont résistants à l'eau et détectables au détecteur de métaux et aux rayons X.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5512
Dimensions : H : 72 x L : 25 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5502

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5513
Dimensions : H : 72 x L : 25 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5503

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5524
Dimensions : H : 72 x L : 25 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5537



PLUM QUICKFIX ELASTIC LONG

30 pansements textiles élastiques et confortables, très longs, pouvant être enroulés plusieurs fois autour du doigt. Les pansements sont doux pour la peau et laissent celle-ci respirer. Les pansements sont fabriqués à partir d'un matériau respirant.



PLUM QUICKFIX DETECTABLE LONG

30 pansements textiles bleus facilement visibles, très longs, pouvant être enroulés plusieurs fois autour du doigt. Particulièrement adaptés à l'industrie agroalimentaire. Les pansements sont fabriqués à partir d'un matériau respirant.



PLUM QUICKFIX XRAY LONG

30 pansements bleus en PE, détectables aux rayons X, très longs, pouvant être enroulés plusieurs fois autour du doigt. Les pansements sont résistants à l'eau et détectables au détecteur de métaux et aux rayons X.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 30
Conditionnement : 8 x 6 x 30
Réf. : 5508
Dimensions : H : 120 x L : 20 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5528

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 30
Conditionnement : 8 x 6 x 30
Réf. : 5509
Dimensions : H : 120 x L : 20 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5529

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 30
Conditionnement : 8 x 6 x 30
Réf. : 5525
Dimensions : H : 120 x L : 20 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5539



PLUM QUICKFIX BLACK

Ce pack contient 45 pansements en tissu polyester noir. Les pansements sont respirants, ce qui les rend adaptés à différents environnements de travail.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5522
Dimensions : H : 72 x L : 25 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5536



PLUM QUICKFIX ALOE VERA

L'aloe vera contenu dans la compresse possède des propriétés apaisantes, hydratantes et calmantes bien connues. Cela crée des conditions optimales pour l'environnement de la plaie et favorise le processus naturel de cicatrisation. Préviend la formation de croûtes. Les pansements sont fabriqués à partir d'un matériau textile respirant.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5514
Dimensions : H : 72 x L : 25 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5506



PLUM QUICKFIX BLOOD STOPPER

Pansement à propriétés hémostatiques. La présence de fibres d'alginate entre les fibres non tissées de la compresse crée un caillot artificiel (gel) à l'intérieur de la compresse, qui stoppe le saignement en 1 à 2 minutes et maintient des conditions d'humidité optimales. Les pansements sont fabriqués à partir d'un matériau textile respirant.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5516
Dimensions : H : 72 x L : 25 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5510



PLUM QUICKFIX BLACK LONG

30 pansements noirs en tissu polyester, très longs, pouvant être enroulés plusieurs fois autour du doigt. Les pansements sont respirants, ce qui les rend adaptés à différents environnements de travail.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 30
Conditionnement : 8 x 6 x 30
Réf. : 5523
Dimensions : H : 120 x L : 20 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5538



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

45 pansements en PE résistants à l'eau, particulièrement adaptés aux environnements de travail à forte humidité. Les pansements sont respirants.

RECHARGE

Boîte de présentation : 6 x 45
Conditionnement : 8 x 6 x 45
Réf. : 5511
Dimensions : H : 72 x L : 25 mm

DISTRIBUTEUR AVEC PANSEMENTS

Réf. : 5501



PLUM WOUND AND EYEWASH 0.9% SODIUM CHLORIDE QUICKRINSE – 5 X 20 ML

5 ampoules de 20 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %. Pour une utilisation individuelle ou en tant que recharge pour distributeurs Plum QuickSafe®, Plum QuickFix&Rinse ou Plum QuickRinse.

Contenu : 5 x 20 ml
Conditionnement : 4 x 5 x 20 ml
Réf. : 5160

Plum QuickSoft Cohesive Bandage

Protection des doigts et autres articulations

Plum QuickSoft Cohesive Bandage est le bandage de choix pour toute personne à la recherche d'une solution efficace, intuitive et sans latex afin de protéger les doigts et autres articulations. La combinaison de ses caractéristiques, de la conception facile à arracher à sa nature auto-adhésive, fait de ce produit un atout précieux à intégrer à n'importe quel kit de premiers soins, offrant un soutien fiable quand vous en avez le plus besoin.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Se place dans un distributeur vert facile à recharger
- Sans latex
- Facile à arracher, pas besoin de ciseaux
- Auto-adhésif, facile à appliquer

BANDAGE DISPONIBLE EN TROIS COULEURS




Bleu



Beige



Noir

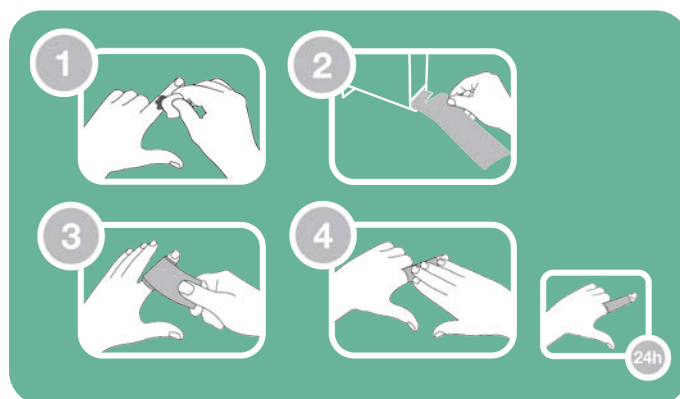

Dimensions

Distributeur	Rouleau de bandage
H : 17 x L : 5,9 x P : 12,9 cm	H: 5 m x L : 5,5 cm

Distributeur Plum QuickSoft Cohesive Bandage avec recharge

Réf.	5554	5555	5556	5557
Description	Distributeur, vide	Distributeur + 1 recharge de bandage bleu	Distributeur + 1 recharge de bandage beige	Distributeur + 1 recharge de bandage noir

Recharges Plum QuickSoft Cohesive Bandage uniquement

Réf.	5541	5542	5543
Description	2 recharges de bandage bleu	2 recharges de bandage beige	2 recharges de bandage noir

Plum QuickSafe® offre des premiers soins rapides, faciles et sûrs

Une solution flexible
offrant une vue
d'ensemble rapide
des premiers soins
disponibles et
permettant de toujours
disposer facilement des
produits adaptés là où
vous en avez besoin.

” PLACEZ LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS AU BON ENDROIT

Spæncom A/S est un fournisseur importants d'éléments en béton. Avec plus de 500 employés, l'entreprise a choisi Plum QuickSafe® pour améliorer la sécurité de son personnel. « Nous avons choisi Plum QuickSafe®, car la station peut être organisée en fonction de chaque zone de travail. Dans les zones où les éléments en béton sont lavés à l'acide, nous pouvons, par exemple, placer les bouteilles de lave-œil à proximité immédiate du poste de travail. Plum QuickSafe® contient les éléments essentiels, peut être installée de manière à ce que les premiers soins soient facilement accessibles et est très pratique grâce à son capot transparent. »

Jany Johannsen, coordinateur
environnement et sécurité

STATIONS DE PREMIERS SOINS PERSONNALISÉES

Remplissez votre station de premiers soins selon vos besoins. Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride pour rincer les corps étrangers des yeux, et Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate pour les accidents impliquant des acides ou des bases. Des pansements adaptés à votre environnement de travail. Gel anti-brûlures pour soulager les brûlures légères. Ampoules de lave-œil pour les accidents mineurs et les yeux irrités. Lingettes pour nettoyer les plaies. Compresses pour les accidents plus graves.

Grâce au capot transparent, vous avez une vue d'ensemble précise de votre équipement.



Plum QuickSafe® Solo



Les premiers soins en toute simplicité

Plum QuickSafe® Solo est une station de premiers soins compacte et intuitive, conçue pour rincer les yeux et les plaies, avec une recharge de pansements, pour une assistance rapide et facile. Visibilité optimale, hygiène étanche à la poussière et contenu personnalisable : un véritable indispensable pour tous les lieux de travail.

Plum QuickSafe® Solo : la solution idéale pour les premiers soins.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Station de premiers soins pour une bouteille de lave-œil et nettoyant plaies et une recharge de pansements
- Des premiers soins visibles et facilement accessibles
- Cabinet de premiers soins hygiénique et étanche à la poussière
- Solution flexible avec un contenu produit personnalisé
- Conception rationalisée et peu encombrante
- Recharge facile

Recharges pour Plum QuickSafe® Solo

Lave-œil et nettoyant plaies	Réf.	Description
	4691	200 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride
	4604	500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride
	4861	500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO
	5160	Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse – 5 ampoules de 20 ml
Pansement	5508	Plum QuickFix Elastic Long
	5509	Plum QuickFix Detectable Long
	5511	Plum QuickFix Water Resistant
	5512	Plum QuickFix Elastic
	5513	Plum QuickFix Detectable
	5514	Plum QuickFix Aloe Vera
	5516	Plum QuickFix Blood Stopper
	5522	Plum QuickFix Black
	5523	Plum QuickFix Black Long
	5524	Plum QuickFix XRay
	5525	Plum QuickFix XRay Long

Station Plum QuickSafe® Solo

Réf.	5191
Description	Station vide
Dimensions	H : 37 x L : 14 x P : 9,5 cm

Station Plum QuickSafe® Solo avec contenu

Réf.	5192
Lave-œil et nettoyant plaies	500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (réf. recharge 4604)
Pansement	Plum QuickFix Elastic (réf. recharge 5512)
Réf.	5193
Lave-œil et nettoyant plaies	500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (réf. recharge 4604)
Pansement	Plum QuickFix XRay (réf. recharge 5524)

Plum QuickSafe®



Plum QuickSafe® VIDE

C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ


Pour organiser votre équipement de premiers soins en toute liberté et selon vos propres exigences, commencez avec une station vide et complétez-la selon vos besoins spécifiques.



ACHETEZ UNE STATION VIDE ET COMPLETEZ-LA SELON VOS BESOINS

Si nos 4 solutions Plum QuickSafe® présentées à la page suivante ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez vous procurer une solution 100 % personnalisée. Commencez avec une station murale et remplissez-la avec des bouteilles de lave-œil et d'autres produits de premiers soins.

Conditionnement : 1
Réf. : 5173
Dimensions : H : 430 x L : 253 x P : 92 mm

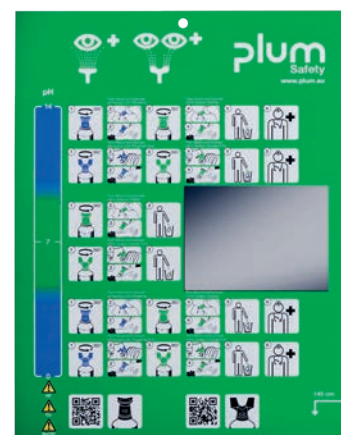

Le plan d'utilisation est incluse dans toutes les stations Plum QuickSafe®.

Une assistance à portée de main

L'accès facile aux premiers soins, crucial pour la sécurité

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Premiers soins complets en un seul endroit
- Rendre les premiers soins visibles et facilement accessibles
- Aide rapide en cas de blessures mineures et graves
- Solution flexible et personnalisée pour tous les besoins
- Cabinet de premiers soins hygiénique et étanche à la poussière
- Visible et facile à recharger



Plum QuickSafe® BASIC

UN BON POINT DE DÉPART

Avec la solution Plum QuickSafe® Basic, vous disposez des produits les plus essentiels et pouvez choisir le contenu des étagères supérieures.

Cette solution vous offre une flexibilité totale.



DES EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR VOTRE STATION DE PREMIERS SOINS ?

La pièce maîtresse de toute la série Plum QuickSafe® est le lave-œil primé de Plum. Avec Plum QuickSafe® Basic, vous le trouverez en combinaison avec Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, ainsi que des ampoules et des pansements. Le reste dépend de vous. Organisez la première étagère de la station pour l'adapter aux besoins de votre entreprise.

CONTENU :	Réf. :
2 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 ampoules de 20 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse	5160
1 recharge de 45 pansements Plum QuickFix Elastic	5512

Conditionnement :	1
Réf. :	5170
Dimensions :	H : 430 x L : 253 x P : 92 mm



Plum QuickSafe® COMPLETE

LA SOLUTION COMPLÈTE

Lave-œil comprenant les ampoules Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate et Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, compresses, lingettes nettoyantes, pansements et gel anti-brûlures pour soulager les brûlures légères.



UN LARGE PANEL DE PREMIERS SOINS

Avec Plum QuickSafe® Complete, vous bénéficiez d'un large panel de produits de premiers soins. Vous y trouvez des produits pour les situations critiques comme pour les accidents mineurs du quotidien.

CONTENU :	Réf. :
18 gels anti-brûlures Plum QuickCool	5150
1 compresse Plum QuickStop	5152
1 x 17 x 17 cm et 2 x 12 x 7,5 cm	
20 lingettes nettoyantes Plum QuickClean	5151
2 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride	4604
1 x 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate	4752
5 ampoules de 20 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse	5160
1 recharge de 45 pansements Plum QuickFix Elastic	5512

Conditionnement :	1
Réf. :	5174
Dimensions :	H : 430 x L : 253 x P : 92 mm



Plum QuickSafe® FOOD INDUSTRY

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS CLIENTS

Nous avons rempli une station avec un contenu adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire.



ASSISTANCE RAPIDE ET SÛRE AVEC DÉTECTION INTÉGRÉE

Une station de premiers soins spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire, les cuisines, cantines et restaurants, incluant notamment des pansements détectables, des lingettes nettoyantes, du gel anti-brûlures et des compresses.

CONTENU :	Réf. :
18 gels anti-brûlures Plum QuickCool	5150
1 compresse pour plaie Plum QuickStop	5152
1 x 17 x 17 cm et 2 x 12 x 7,5 cm	
20 lingettes nettoyantes Plum QuickClean	5151
2 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash	4604
0.9% Sodium Chloride	
1 x 200 ml de Plum Wound and Eyewash	4752
pH Neutral 4.9% Phosphate	
1 recharge de 45 pansements	5513
Plum QuickFix Detectable	
1 recharge de 30 pansements	5509
Plum QuickFix Detectable Long	

Conditionnement :	1
Réf. :	5175
Dimensions :	H : 430 x L : 253 x P : 92 mm



Plum QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

UNE SOLUTION FORTE POUR DES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Les accidents mettant en jeu des acides et des bases peuvent avoir des répercussions graves et irréversibles en cas d'accessibilité compromise.



QUAND LA DIFFÉRENCE ENTRE ACCIDENT MINEUR ET GRAVE SE COMPTE EN SECONDES

S'il existe un risque d'accidents impliquant des acides et des bases, une solution de sécurité sous forme de lave-œil mobile est cruciale. Elle contient notamment du produit Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, qui permet de rincer les deux yeux en même temps.

CONTENU :	Réf. :
1 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash	4861
0.9% Sodium Chloride DUO	
1 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash	4801
pH Neutral 4.9% Phosphate DUO	
1 x 200 ml de Plum Wound and Eyewash	4752
pH Neutral 4.9% Phosphate	
5 ampoules de 20 ml de Plum Wound	5160
and Eyewash 0.9% Sodium Chloride	
QuickRinse	
1 recharge de 45 pansements Plum	5512
QuickFix Elastic	

Conditionnement :	1
Réf. :	5171
Dimensions :	H : 430 x L : 253 x P : 92 mm

Plum 1Aid Station

Premiers soins rapides, faciles et sûrs

Plum 1Aid est une station de premiers soins murale qui s'adapte à la plupart des lieux de travail. Une solution flexible offrant une vue d'ensemble rapide des premiers soins disponibles et permettant de toujours disposer facilement des produits adaptés là où vous en avez besoin.

Plum 1Aid vous permet de combiner les produits de premiers soins et de traitement des plaies en fonction des besoins de votre lieu de travail.



Plum 1Aid Station



CONTENU :

- 1 gel anti-brûlures Plum QuickCool
- 1 lingette nettoyante Plum QuickClean
- 1 compresse Plum QuickStop
- 2 compresses Plum Blood Stopper
- 1 compresse Plum Blood Stopper Mini
- 1 compresse pour brûlures Plum BurnGel
- 1 Plum Protect Kit pour l'aide respiratoire
- 1 recharge de Plum QuickFix Elastic
- 1 recharge de Plum QuickFix Water Resistant
- 1 x 250 ml de Plum Wound and Eyewash Spray

RÉF. :

- 5150
- 5151
- 5152
- 5154
- 5153
- 5156
- 5155
- 5512
- 5511
- 4554

Conditionnement :

1

Réf. :

5184

Dimensions :

H : 430 x L : 253 x P : 92 mm



Recharges de Plum 1Aid



PLUM BLOOD STOPPER MINI

Une compresse stérile plus petite avec quatre fonctions. Elle peut être utilisée comme pansement compressif en cas de saignement important, comme protection pour les plaies superficielles, comme compresse pour brûlure avec une surface de protection de la plaie ou comme soutien temporaire.

Réf. 5153



PLUM BLOOD STOPPER

Une compresse stérile avec quatre fonctions. Elle peut être utilisée comme pansement compressif en cas de saignement important, comme protection pour les plaies superficielles, comme compresse pour brûlure avec une surface de protection de la plaie ou comme soutien temporaire.

Réf. 5154



PLUM PROTECT KIT

Dispositif de protection pour les situations de réanimation par le bouche-à-bouche. Limite le contact entre la personne prodiguant les premiers soins et la personne en danger grâce à un masque respiratoire avec valve unidirectionnelle.

Réf. 5155



PLUM BURNGEL

Compresse au gel refroidissant et apaisant rapidement la douleur des brûlures. L'effet de refroidissement réduit la douleur et le gonflement, et empêche la brûlure de s'étendre plus profondément dans la peau.

Réf. 5156



PLUM QUICKCOOL

Gel anti-brûlures pour premiers soins en cas de brûlures ou d'ébouillantage légers. Effet refroidissant et analgésique. Contient de l'huile essentielle d'arbre à thé. Peut être utilisé individuellement ou pour la recharge des stations de premiers soins.

Réf. 5150



PLUM QUICKCLEAN

Lingettes nettoyantes pour plaies et coupures mineures. Chaque lingette est emballée séparément et contient de l'eau stérile. Peuvent être utilisées individuellement ou pour la recharge des stations de premiers soins.

Réf. 5151



PLUM QUICKSTOP

Ensemble de compresses pour hématomes mineurs et majeurs. Compresses stériles avec compression intégrée. Élastiques, non adhésives et respectueuses de la peau. Pour un usage général comme pansement compressif, compresse de soutien et compresse de protection.

Réf. 5152



PLUM QUICKFIX WATER RESISTANT

Pansements résistants à l'eau, particulièrement adaptés aux environnements de travail à forte humidité. Les pansements sont conçus en matériau PE protecteur laissant la peau respirer.

Réf. 5511



PLUM QUICKFIX ELASTIC

Pansements textiles élastiques et confortables s'adaptant aux mouvements de la peau. Les pansements sont doux pour la peau et laissent celle-ci respirer.

Réf. 5512



PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY

Solution de chlorure de sodium à 0,9 % offrant un premier soin immédiat pour les accidents mineurs aux yeux ou les coupures et éraflures sur la peau.

Réf. 4554



PLUM 1AID STATION - VIDE

Station pratique et fonctionnelle avec capot transparent, hygiénique et protégeant les produits de la poussière.

Réf. 5182

Traitement des plaies et des yeux

Des solutions pratiques pour empêcher l'aggravation des accidents mineurs



Les plus petites coupures et plaies peuvent avoir de graves répercussions si elles ne sont pas traitées à temps. Avec le bon matériel de traitement des plaies et des yeux, vous pouvez facilement nettoyer et bander une petite plaie, et reprendre le travail rapidement.



PLUM 1AID BAG – BASIC

Trousse de premiers soins pratique pour votre ceinture et vos vêtements de travail ou tout lieu de travail nécessitant une solution portable pour les premiers soins. Facile à ouvrir, elle fournit des premiers soins rapides et hygiéniques en déplacement.

TROUSSE INCLUANT :

- 1 recharge de Plum QuickFix Water Resistant
- 1 recharge de Plum QuickFix Elastic
- 1 x 200 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride
- 1 Plum QuickCool
- 1 Plum QuickClean
- 1 Plum QuickStop

Conditionnement : 4
Réf. : 4960



PLUM 1AID BAG – INDUSTRIAL

Trousse de premiers soins pratique pour votre ceinture et vos vêtements de travail ou tout lieu de travail nécessitant une solution portable pour les premiers soins. Facile à ouvrir, elle fournit des premiers soins rapides et hygiéniques en déplacement.

TROUSSE INCLUANT :

- 2 recharges de Plum QuickFix Elastic
- 1 x 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate
- 1 x 50 ml de Plum Wound and Eyewash Spray
- 1 Plum QuickCool
- 1 Plum QuickClean
- 1 Plum QuickStop

Conditionnement : 4
Réf. : 4961



PLUM BELT BAG POUR BOUTEILLES DE 200 ML

Transportez votre lave-œil et nettoyant plaies dans cette trousse pratique, à fixer à votre ceinture, vos vêtements de travail, etc. La trousse est facile à ouvrir, pour des premiers soins rapides en cas d'accident. Une manière sûre et hygiénique de stocker et protéger le bouteille. Bouteille non incluse.

Conditionnement : 10 unités
Réf. : 4692



50 ML / 250 ML

PLUM WOUND AND EYEWASH SPRAY

Solution de chlorure de sodium à 0,9 % offrant un premier soin immédiat pour les accidents mineurs aux yeux ou les coupures et éraflures sur la peau.

Contenu : 50 ml
Conditionnement : 24 x 50 ml 45530
Réf. : en, de, se, da, fr, no, fi,
Langues : pt, it, nl, es, pl, is

Contenu : 250 ml
Conditionnement : 12 x 250 ml
Réf. : 4554

Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIa conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



PLUM QUICKCLEAN

Lingettes nettoyantes pour plaies et coupures mineures. Chaque lingette est emballée séparément et contient de l'eau stérile. Peuvent être utilisées individuellement ou pour recharger les stations Plum QuickSafe®. 20 sachets par boîte.

Conditionnement : 6 x 20
Réf. : 5151



PLUM QUICKSTOP

Ensemble de compresses pour premiers soins efficaces en cas de saignements mineurs ou majeurs. Compresses stériles avec compression intégrée. Élastiques, non adhésives et respectueuses de la peau. Plum QuickStop pour un usage général comme pansement compressif, compresse de soutien et compresse de protection.

ENSEMBLE INCLUANT :

1 compresse Plum QuickStop, 17 x 17 cm
 2 compresses Plum QuickStop, 12 x 7,5 cm

Conditionnement : 6 x 3
Réf. : 5152



PLUM QUICKCOOL

Gel anti-brûlures pour premiers soins en cas de brûlures ou d'ébouillantage légers. Effet refroidissant et analgésique. Contient de l'huile essentielle d'arbre à thé. Peut être utilisé individuellement ou pour recharger les stations Plum QuickSafe®.

18 sachets par boîte.

Conditionnement : 6 x 18
Réf. : 5150



PLUM QUICKCLEAN BOX

Boîte de 40 lingettes nettoyantes pour plaies et coupures mineures. Chaque lingette est emballée séparément et contient de l'eau stérile. Chaque lingette mesure 130 x 200 mm.

Conditionnement : 11 x 40
Réf. : 5551
Support mural : 955904

Kits de base



KIT DE BASE 6001

Achetez 4 bouteilles de 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride et recevez gratuitement un distributeur de pansements.

CONTENU :

1 distributeur Plum QuickFix
4 x 500 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Réf. : 6001



KIT DE BASE 6002

Achetez 4 bouteilles de 200 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride et recevez gratuitement un distributeur de pansements.

CONTENU :

1 distributeur Plum QuickFix
4 x 200 ml de Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Réf. : 6002



KIT DE BASE 6003

Achetez 4 bouteilles de 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate et recevez gratuitement un distributeur de pansements.

CONTENU :

1 distributeur Plum QuickFix
4 x 200 ml de Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Réf. : 6003



HF



Ca



NaClO

IMPORTANT

Ne pas utiliser Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate en cas d'incident impliquant des éclaboussures contenant de l'acide fluorhydrique, de l'hypochlorite de calcium ou de l'hypochlorite de sodium (agents blanchissants).



KIT DE BASE 6004

Achetez 6 recharges de pansements Plum QuickFix Water Resistant et recevez gratuitement un distributeur de pansements.

CONTENU :

1 distributeur Plum QuickFix
6 pansements Plum QuickFix Water Resistant

Réf. : 6004



KIT DE BASE 6005

Achetez 6 recharges de pansements Plum QuickFix Elastic et recevez gratuitement un distributeur de pansements.

CONTENU :

1 distributeur Plum QuickFix
6 pansements Plum QuickFix Elastic

Réf. : 6005

Plum Safety est désormais conforme au MDR

(Règlement européen sur les dispositifs médicaux, MDR (UE) 2017/745)

Les produits lave-œil de Plum Safety ont officiellement été transférés de l'ancienne MDD (directive sur les dispositifs médicaux) au MDR (règlement sur les dispositifs médicaux). Cela signifie que nos produits lave-œil ont été évalués, documentés et certifiés conformément aux exigences plus strictes de l'UE en matière de dispositifs médicaux.

Cette transition représente une amélioration significative de la qualité et garantit que les produits respectent les dernières exigences en matière de sécurité, traçabilité et documentation. Elle garantit également que nos produits commercialisés respectent des normes bien plus strictes en matière de documentation, de tests et de suivi continu, ce qui renforce la sécurité et la transparence pour tous ceux qui utilisent ou distribuent les produits lave-œil Plum Safety.

Quelle est la différence entre MDD et MDR ?

Le MDR de l'UE introduit des règles plus strictes que la MDD afin de garantir que les dispositifs médicaux sont plus sûrs et plus performants. Les changements apportés par le MDR impliquent des normes de sécurité plus élevées, une plus grande attention portée à la sécurité de l'utilisateur, une amélioration continue et une traçabilité par rapport à la MDD.

Parmi les changements les plus importants figurent les suivants :

- Certification et documentation plus strictes
- Contrôle plus complet par les organismes notifiés
- Transparence accrue pour les utilisateurs ou évaluateurs de l'équipement

Nouvelles classifications des dispositifs sous le MDR



Les produits lave-œil Plum Safety passeront de la classe Is à la classe IIb des dispositifs médicaux, ce qui implique des exigences plus strictes pour la documentation technique et les systèmes de gestion de la qualité.

De plus, les produits seront renommés Plum Wound and Eyewash pour refléter l'élargissement de leur champ d'application : ils peuvent être utilisés pour rincer les yeux, la peau et les plaies, ce qui augmente la valeur pour vous en tant que distributeur et pour vos clients.

Distinguer un lave-œil MDD d'un lave-œil MDR

1. Nouveau nom du produit

MDD : Plum Eyewash

MDR : Plum Wound and Eyewash

2. Pictogrammes modifiés sur l'étiquette

MDD : peut être utilisé dans les yeux

MDR : peut être utilisé sur les plaies et dans les yeux


Autre façon de repérer les différences des produits MDR :

- Traçabilité améliorée grâce à un marquage clair (lot, UDI et date de production)
- Étiquetage traduit dans les langues des pays de vente (étiquette multi-couches)



Nouveau nom du produit

Nouveaux pictogrammes

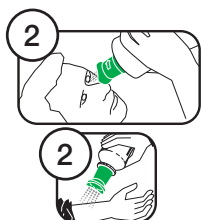

Obtenez plus d'informations sur les symboles, pictogrammes, etc.



Plum Safety ApS
Mandelalleen 1
DK-5610 Assens

T : +45 6916 9600
info@plum.eu

www.plum.eu

